




<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2016DM-0014785	REGISTRO VIGENTE HASTA: 8-JUN-2026
<b>TIPO DE REGISTRO</b>	IMPORTAR Y VENDER	TIPO DE DISPOSITIVO Y RIESGO: NO INVASIVO, RIESGO IIA
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	5 AÑOS	NO ESTÉRIL
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La atmósfera siempre debe ser propicia para el almacenamiento de los guantes.</li> <li>• Los guantes antes de abrirse para su uso deben almacenarse en un lugar oscuro, fresco y seco.</li> <li>• Los guantes deben evitar áreas con calor excesivo. Las áreas de almacenamiento deben controlarse a menos de 40°C /104 °F.</li> <li>• Los guantes deben almacenarse en áreas con buena ventilación.</li> <li>• Los guantes deben estar protegidos de la luz solar directa y de la iluminación fluorescente.</li> <li>• Los guantes deben almacenarse lejos de cualquier equipo que genere calor y radiación de energía.</li> </ul>	<p><b>FABRICANTE:</b> M/S MRK HEALTHCARE PVT. LTD CON DOMICILIO EN INDIA MRK HEALTHCARE PVT LTD CON DOMICILIO EN INDIA</p> <p><b>IMPORTADOR:</b> AVALON PHARMACEUTICAL S.A CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C</p> <p><b>AQL: 1.5</b></p>
<b>DIMENSIONES</b> Largo: 19.5 cm Alto: 6 cm Ancho: 11 cm	<b>TITULAR (ES):</b> AVALON PHARMACEUTICAL S.A <b>CIUDAD / PAÍS DE ORIGEN:</b> BOGOTA - D.C. COLOMBIA	<b>ACONDICIONADOR:</b> BELLE FARMA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL Y REFERENCIAS:</b>	<p>Caja interna 100 piezas</p> <p>Caja master 1000/2000 piezas (10/20 cajas internas)</p> <p>Contenedor de 20 pies 20,50,000 piezas (2050/1025 Cartones)</p> <p>Contenedor de 40 pies 45,00000 piezas (4500/2250 Cartones)</p> <p>Talla XS, S, M, L, XL</p>	

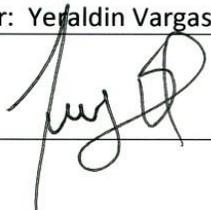

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<p>Guantes de latex para examen bajos en talco 100% Latex - AQL 1.5 Más livianos para un mejor desempeño Más resistentes- Bajos en talco para evitar irritaciones en la piel Aumenta la sensibilidad Biodegradables</p>
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p>LATEX DE CAUCHO NATURAL</p>
<b>ASPECTO VISUAL</b>	<p>Color : Amarillo pálido, puede variar de acuerdo al tiempo y las condiciones de almacenamiento Diseño : Dedos lisos, pulgar y los dedos en un plano, una forma para ambas manos (ambidiestros), puño enrollado. Contenido de polvo : &lt;10.0 mg/dm 2 max Nivel de proteína extraible : &lt;200 µg/ dm 2 Esterilización : Sin esterilizar</p>
<b>INDICACIONES DE USO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lave sus manos antes de usar los guantes.</li> <li>• Saque el contenido del empaque.</li> <li>• Evite aplicar fuerza excesiva al ponerse los guantes.</li> <li>• Mantenga sus uñas cortas y cambie frecuentemente los guantes para evitar roturas.</li> <li>• Los guantes usados deberán ser descartados en el lugar correspondiente de acuerdo a las exigencias de los entes regulatorios locales.</li> </ul>
<b>ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo para un solo uso.</li> <li>• El usuario debe considerar en que va a usar el producto para determinar si elimina cualquier exceso de talco. Puede retirar cualquier exceso con una toalla o esponja esteril u otro método.</li> <li>• Los casos de alergia al latex o al talco deben ser informados. Si tiene alguna reacción al producto descontinúe su uso y acuda al médico.</li> </ul>
<p>Elaborado por: Yeraldin Vargas</p> 	<p>Aprobado por: Rosa Mery Niño Pérez</p> 